



BIOMAK

05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13
tel/fax (0-22) 723-69-54
tel.(0-22) 723-70-72
e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.pl

LIPO-FIT LF100

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zabieg urządzeniem Lipo-Fit usprawnia wymianę komórkową, organizm dużo lepiej przyswaja związki odżywcze i znacznie szybciej pozbywa się szkodliwych produktów przemiany materii.



DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie: akumulator 9,6V
 - Moc pobierana 7 W
 - Wymiary 163dł. x 50szer. mm
 - Ciężar ~0,5 kg
- Max. natężenie ultradźwięków 0,5W/cm²

Wyposażenie:

- aparat Lipo-Fit LF 100
- zasilacz 12-15V/0,5A
- instrukcja obsługi

UWAGA!

MUSISZ TO WIEDZIEĆ zanim przystąpisz do zabiegu:

Nie moczyć głowicy - w celu dezynfekcji należy przetrzeć metalową część, płynem dezynfekującym lub spirytusem dostępnym w aptece.



Moczenie głowicy powoduje jej trwałe uszkodzenie. Po zakończonym zabiegu metalową część głowicy wytrzeć, tak by usunąć resztki płynu/cieczy/preparatu z powierzchni.

Aparat po włączeniu ustawia się na ostatnio używany tryb pracy.

Aparat samoistnie wyłącza się po około 2 minutach pracy (gaśnie dioda ON/OFF) – jest to zabezpieczenie przed przegrzaniem głowicy.

Niekorzystna dla aparatu jest praca „w powietrzu” - czyli kiedy aparat jest włączony a nie ma kontaktu ze skórą.

Dlatego należy prowadzić jak najdłuższe pasma głowicą, dotykając skóry. Natomiast przerwy kiedy głowica jest oderwana od skóry mają być krótkie.

UNIKAĆ trzymania włączonego urządzenia w przerwach podczas zabiegu. Jeśli nie używasz urządzenia – np. dokładasz na skórę preparat – wyłącz je przyciskiem ON/OFF – nie świeci się dioda.

Niektóre osoby mogą słyszeć „piszczenie” urządzenia podczas pracy – jest to związane z zakresem słuchu danej osoby.

Po zakończonym zabiegu urządzenie pozostawić w suchym miejscu, zabezpieczyć przed upadkiem.

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

-nacisnąć **dłużej** przycisk ON/OFF i sprawdzić czy świeci się czerwona dioda. Po kolejnym naciśnięciu ON/OFF dioda powinna zgasnąć co oznacza że aparat został wyłączony.


Po naciśnięciu ON/OFF , nacisnąć przycisk PULSE i sprawdzić czy błyska odpowiednia dioda. Sprawdzić czy po następnych naciśnięciach PULSE zwiększa się częstotliwość błysków diody. Jeśli tak, to aparat jest sprawny i gotowy do pracy.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Jeżeli w trakcie pracy, moc aparatu znacznie spadnie lub aparat się wyłączy jest to oznaka rozładowania akumulatora. Wtedy należy włożyć zasilacz wtyczkowy do gniazda sieciowego 230V, 50Hz z uziemieniem, a wtyczkę kabla do gniazda aparatu. Powinna się zaświecić i błyskać zielona dioda "CHARGING". Należy zostawić aparat aż do momentu kiedy dioda zaświeci się na stałe. Może to potrwać kilka godzin.

Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność akumulatora należy:

- ładować aparat dopiero gdy zostanie rozładowany akumulator
- ładuj akumulator do końca
- nie przerywać procesu ładowania

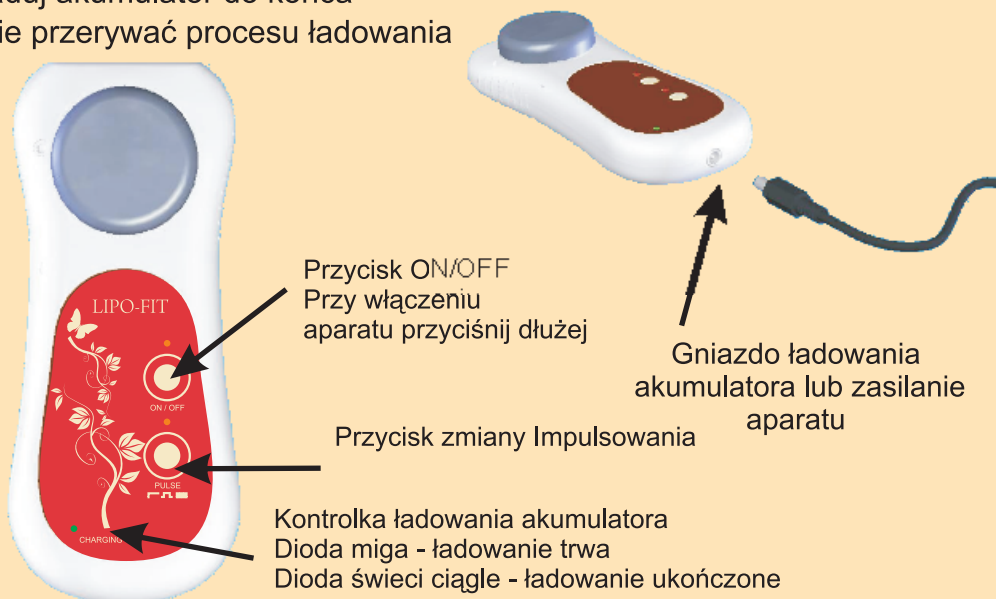

Liposukcja ultradźwiękowa - jest nowoczesnym, nieinwazyjnym zabiegiem redukującym złogi tłuszczu i cellulit

Podczas liposukcji ultradźwiękowej na komórki tłuszczowe działa kawitacja ultradźwiękowa, powodująca rozbicie komórek tłuszczowych i ich redukcję. Efektem jest utrata nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Wzrost temperatury w tkankach przyczynia się do lepszego metabolizmu. Tłuszcz i toksyny usuwane są z organizmu poprzez układ naczyniowy, limfatyczny oraz gruczoły potowe.

Ważną rolę odgrywa wątroba, gdzie trafiają komórki tłuszczowe (przez układ limfatyczny i naczyniowy)

i rozkładane są tak, jak tłuszcz pochodzący z pożywienia.

Ważne by w trakcie kuracji zadbać o zdrowszą dietę aby dodatkowo nie obciążać wątroby.

Urządzenie Lipo-Fit działa na dwóch etapach:

- 1 - rozbicie komórek tłuszczowych, upłynnienie ich zawartości;
- 2 - zwiększenie metabolizmu w tkankach, poprawa pracy układu limfatycznego, pobudzenie krążenia, masaż w głębi tkanek.
- 3 - dla najlepszych efektów proponujemy dodatkowo wykonać zabieg z użyciem aparatu Megasonic MS 300 lub MS 200

Zabieg urządzeniem Lipo-Fit usprawnia wymianę komórkową, organizm dużo lepiej przyswaja związki odżywcze i znacznie szybciej pozbywa się szkodliwych produktów przemiany materii.

PRZEPROWADZENIE ZABIEGU

Dodatkową zaletą urządzenia Lipo-Fit jest brak potrzeby specjalnego przygotowywania skóry do zabiegu.

Na miejsce poddawane zabiegowi nakładamy żel do ultradźwięków. Nie wolno stosować kosmetyków, które nie są przystosowane do zabiegów ultradźwiękowych. Zabiegi wykonujemy przez 15-30 minut. W chwili gdy aparat wyłącza się, dokładamy żelu w kolejne miejsce. Zabieg

wykonujemy co 2 dni, minimum 10 zabiegów, max. 12. Następnie 2-3 miesiące przerwy.

Dla dodatkowej stymulacji skóry można włączyć mikromasaż - przycisk PULSE. Tryb dostosować do własnych odczuć.

Zabiegi należy przeprowadzać przy użyciu następujących żeli:

- Żel/serum antycellulitowo-ujędrniający z zieloną herbatą
- Żel antycellulitowo-wyszczuplający z kawą ekologiczną
- Żel antycellulitowy
- Żel wyszczuplający z kompleksem antycellulitowym



Wskazanie do stosowania:

- nawilżanie skóry
- rozbijanie złogów tłuszczowych
- skóra dojrzała, pozbawiona jędrności
- skóra odwodniona, zmęczona
- ogólna poprawa estetyki skóry

Zalety zabiegu:

- redukcja tkanki tłuszczowej
- redukcja cellulitu
- pobudzenie krążenia
- poprawa jędrności skóry
- zabiegi są bezbolesne

Cellulit dotyka 85% kobiet po 25 roku życia. Może pojawić się u osób otyłych czy tych, którym zdarzyło się nadmiernie przybrać na wadze

(cellulit tłuszczowy – powstaje w skutek niewłaściwego odkładanie się tkanki tłuszczowej) lub szczupłych (cellulit wodny – spowodowany jest nieprawidłowym przepływem krwi i limfy w tkankach).

Cellulit jest problemem złożonym, wywołany jest przez różne czynniki. Ogólnie jest to metaboliczne zaburzenie tkanki podskórnej, które w następstwie prowadzi do zmian wyglądu ciała.

Do czynników zewnętrznych zaliczamy siedzący tryb życia (np. Praca w biurze), dietę wysokokaloryczną, bogatą w sól, wypijanie dużej ilości kawy, palenie papierosów – to sprzyja rozwojowi tkanki tłuszczowej, kiepskiemu krążeniu, płyny w organizmie zatrzymują się a to w efekcie prowadzi do powstania cellulitu.

Do czynników wewnętrznych zaliczamy przede wszystkim predyspozycje genetyczne (geny decydują o tym ile tłuszczu odkłada się w tkankach) czy zmiany hormonalne (cellulit często pojawia się podczas dojrzewania, ciąży czy menopauzy, dlatego ważne jest kontrolowanie wagi). Cellulit pojawia się także u osób ze słabo funkcjonującym systemem krążenia.

Cellulit dotyczy głównie kobiety, ma to związek z budową tkanki tłuszczowej, która różni się od budowy tkanki tłuszczowej mężczyzn.

W przypadku cellulitu wodnego zaleca się wykonywanie drenażu limfatycznego. Posiadaczkom cellulitu tłuszczowego poleca się masaże, które rozluźniają tkankę łączną, poprawiając tym samym krążenie, ultradźwięki/sonoforezę, która powoduje ucieplenie w tkankach co w efekcie pomaga spalić tkankę tłuszczową.

Sonoforeza poprawia krążenie oraz dotlenia i ujędrnia skórę, szczególnie w połączeniu z odpowiednimi kosmetykami.

Urządzenie Lipo-Fit łączy wszystkie powyższe metody; przede wszystkim wykorzystuje kavitację ultradźwiękową o odpowiedniej częstotliwości - jest skuteczne zarówno w przypadku cellulitu wodnego, jak i tłuszczowego.

W trakcie zabiegów należy zmienić dietę, mniej węglowodanów i tłuszczów zwierzęcych, więcej białka, dużo warzyw i owoców

oraz dużo niegazowanej wody mineralnej.

UWAGA!

Przeciwwskazania do stosowania:

- ciąża i okres karmienia piersią,
- cukrzyca,
- słaba krzepliwość krwi,
- nosicielstwo HIV,
- przepuklina,
- zażywanie aspiryny lub innych środków przeciwzapalnych w ciągu 2 tygodni przed zabiegiem,
- choroba nowotworowa (do 5 lat po zakończeniu kuracji),
- niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze,
- choroby wirusowe i bakteryjne skóry, przerwana ciągłość naskórka,
- gorączka, osłabienie i wycieńczenie organizmu,
- osteoporoza,
- obecność w okolicy zabiegowej ciał obcych, metalicznych i implantów (pracujemy 15 cm od implantu),
- epilepsja, stwardnienie rozsiane,
- menstruacja,
- rozrusznik, zastawka serca,
- choroby wątroby

UWAGA!

Żele kontaktowe powinny być przeznaczone do zabiegów z ultradźwiękami. Pamiętaj, że podczas zabiegu głowica powinna być w ciągłym ruchu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po zabiegu należy usunąć żel i przetrzeć głowicę 70% spirytusem. Głowica powinna być używana z ostrożnością. Unikać wstrząsów i upadków głowicy – uszkodzona może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.



B I O M A K

BIOMAK Sp.J. 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13, tel.: (022) 723 70 72, tel./fax: (022) 723 69 54,
e-mail: biomak@biomak.pl www.biomak.pl

BIOMAK filia, ul. Górnickiego 18, 32-600 Oświęcim,
tel./fax: 0 33 842 22 05, kom. +48 505 40 55 26, e-mail: oswiecim@biomak.pl